

新型保護クッション



褥瘡予防ひじ・かかとパッド

Heel Keeper

ヒールキーパー

特許登録第6389196号

医療・介護の現場から生まれた

全く新しいタイプの床ずれ予防パッド

特徴 医療・介護の現場の声がこんなに実現しました。

- **床ずれがしやすい“かかと”をやさしく保護**
体圧分散性に優れたウレタンフォームを使用し、かかとをやさしく保護します。足及びかかとが深く沈むことなく体圧を分散するので、床ずれ予防に最適です。
- **使いやすい専用設計でしっかりフィット**
かかとだけでなく、ひじにもぴったりとフィットする機能をもった使いやすいデザインです。また、フリーサイズのためサイズ選びが不要です。
- **コンパクト設計で負担を軽減**
軽量なので、からだへの負担が少なくなり快適に。コンパクトなのでつけたまま車椅子に座ることができます。
- **通気性に優れた生地でムレ感のない快適な使い心地**
抗菌・消臭効果の高い竹繊維を使った生地を使用しているので、通気性が良く、湿気がこもりません。
- **丸洗いができるのでいつも衛生的**
病院やご家庭の洗濯機で丸洗いできるので、いつでも清潔にお使いいただくことができます。

ヒールキーパーの秘密

竹繊維を使用した生地を使用

東亜紡織(株)
と
共同開発

表面の生地は、当社と東亜紡織(株)が共同開発した、竹の繊維を染色加工をせずに素材の良さを生かして作られた、クリーンで自然な色合いの**パイル生地**です。竹は優れた抗菌力があり、昔から珍重されてきました。

私たちはそこに注目して「**独自の製法**」を開発、竹の持っている抗菌力を引き出し、生地に生かしています。


かかと・ひじの両方で使用可能

サイズが調整できる専用設計なので、使用状況に応じて「かかと」だけでなく「ひじ」も保護できます。また、伸縮可能なゴムを入れることにより、**しっかりフィットし外れにくい**です。




ウレタン素材の特徴

「ムマック®」とは、ウレタンフォームの気泡にあるフィルム状の膜を取り除き、空気や水を通りやすくした無膜ウレタンフォームです。無膜化することによりムレにくくなり、水洗いも可能となります。

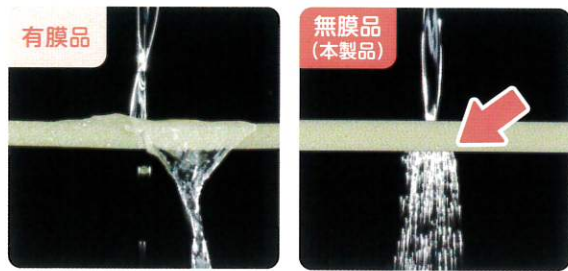


有膜品
流下した水が、フォームの表面を伝わり、手前に流れ落ちている。

無膜品 (本製品)
流下した水が、フォームを通過して流れ落ちている。(通水性が良好)

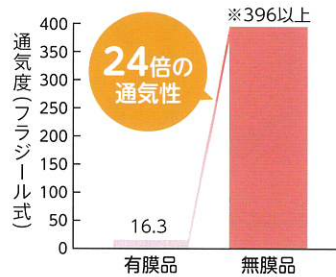

※単位: ml/cm/s (JIS K 6400-7 8法 試験体厚=10mm)
※実測値であり、保証値ではありません。(当社品比較)
※測定限界値

電子顕微鏡写真

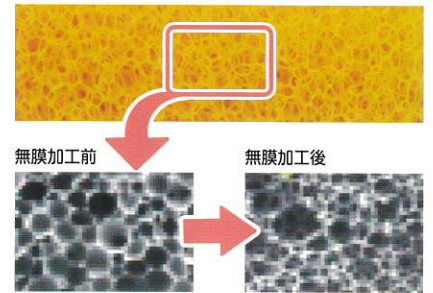

※ムマック®はアキレス株の登録商標です。

一般の製品と比べて
約75%の省サイズ化

軽量なので、からだへの負担が少なく快適。

ホックでとめてしっかりフィット!

[開いた状態]

[閉じた状態]

換気用の空間を設けた通気性の高い構造

- 使用上の注意**
- 洗濯には中性洗剤をご使用ください。(塩素系の漂白剤は使用しないでください)
 - 洗濯後は、しばらくは風通しの良い日陰で干してください。
 - 熱湯での洗濯はおやめください。
 - 高温でのアイロン等は使用しないでください。
 - 本来の使用目的以外には使わないでください。

医療・介護の現場から生まれた全く新しいタイプの床ずれ予防パッド **ヒールキーパー**

お問い合わせ先

お気軽にご相談ください。



ブルネエズ株式会社

〒465-0041 名古屋市名東区朝日が丘75番地5

TEL 052-774-4688 FAX 052-775-8186